



EXPORTATION PAR FORMULAIRES

Guide de l'utilisateur

V4.0 Novembre 2024

Table des matières

1.	Exportation simple par formulaires	2
a.	Introduction	2
b.	Formulaires disponibles	3
	Pour les utilisateurs de SIRIS Rachis	3
	Pour les utilisateurs de SIRIS Rachis + Spine Tango	3
	Pour les utilisateurs de Spine Tango	4
c.	Possibilité de filtrage pour l'exportation	4
d.	Exportation des résultats	7
2.	Exportations avancées	7
e.	Introduction	7
f.	Sélectionner le formulaire à exporter	8
g.	Critères de recherche	9
h.	Exportation des résultats	11
i.	Ouverture des données exportées dans Excel	12

1. Exportation simple par formulaires

a. Introduction



L'exportation simple par formulaire permet aux utilisateurs d'exporter les données existantes de chaque formulaire.

Cette fonction d'exportation est accessible via le menu déroulant (voir illustration ci-dessous) ou en cliquant sur « Exportation de données » sur le tableau de bord.



Exportation simple par formulaire

Sélectionnez la période en utilisant la date clé

jj/mm/aaaa  et jj/mm/aaaa 

Les données trouvées proviennent du site auquel l'utilisateur s'est connecté à chaque fois. Si l'utilisateur est connecté au niveau du département, il ne verra que les résultats du département auquel il est connecté.

b. Formulaires disponibles

Pour les utilisateurs de SIRIS Rachis

Seuls les formulaires suivants sont disponibles pour les utilisateurs de la colonne vertébrale SIRIS:

- Chirurgie SIRIS
- EQ5D 5L
- COMI-dos Complément OP+ST
- Niveau de formation

Si vous n'enregistrez que l'opération SIRIS, vous ne disposez que de ce formulaire pour l'exportation.

Pour les utilisateurs de SIRIS Rachis + Spine Tango

Les formulaires suivants sont disponibles pour les utilisateurs de SIRIS Rachis + Spine Tango :

Recherches	
1. Chirurgie SIRIS et Spine Tango - Filtrer par date de l'opération	22. Chirurgie 2017 avec ajout de trauma v2 - Filtrer par date de l'opération
2. Visite de contrôle 2017 - Filtrer par date de suivi	23. Chirurgie 2017 - Filtrer par date de l'opération
3. Conservatif 2018 - Filtrer par date de traitement	24. Chirurgie 2017 avec ajout de trauma - Filtrer par date de l'opération
4. COMI cervical cons.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	25. Chirurgie 2011 - Filtrer par date de l'opération
5. COMI cervical chir.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	26. Chirurgie 2006 - Filtrer par date de l'opération
6. COMI lombaire cons.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	27. Chirurgie 2005 - Filtrer par date de l'opération
7. ODI - Filtrer par date d'examen	28. Staged 2011 - Filtrer par date de l'opération
8. NDI - Filtrer par date d'examen	29. Staged 2006 - Filtrer par date de l'opération
9. EQ5D 3L - Filtrer par date d'examen	30. Staged 2005 - Filtrer par date de l'opération
10. EQ5D 5L - Filtrer by Examination date	31. Visite de contrôle 2006 - Filtrer par date de suivi
11. COMI lombaire chir.+ST supp. (ePROM) - Filtrer par date d'évaluation	32. Visite de contrôle 2011 - Filtrer par date de suivi
12. Education - Filter by Date recorded	33. Visite de contrôle 2005 - Filtrer par date de suivi
13. Intraop Neuromonitoring (IONM) - Filter by Monitoring date	34. Conservatif 2011 - Filtrer par date de traitement
14. mJOA - Filtrer par date d'évaluation	35. COMI low back - 1 year postop - Filtrer par date d'évaluation
15. DRAM - Filtrer par date d'évaluation	36. COMI low back - postop - Filtrer par date d'évaluation
16. NURICK - Filtrer par date d'évaluation	37. COMI low back - preop - Filtrer par date d'évaluation
17. SRS-30 - Filtrer par date d'examen	38. COMI neck - 1 year postop - Filtrer par date d'évaluation
18. SF-36 v2 - Filtrer par date d'examen	39. COMI neck - postop - Filtrer par date d'évaluation
19. AOSpine PROST - Filtrer par date d'évaluation	40. COMI neck - preop - Filtrer par date d'évaluation
20. Déformation complémentaire adulte - Filtrer par date d'examen	41. SF-36 v1 - Filtrer par date d'examen
21. Chirurgie 2017 V2 - Filtrer par date de l'opération	42. Begleiterkrankungen Patient - Filter by Untersuchungsdatum

Pour les utilisateurs de Spine Tango

Les formulaires suivants sont disponibles pour les utilisateurs de Spine Tango:

Recherches	
1. Chirurgie 2017 V2 - Filtrer par date de l'opération	21. Chirurgie 2017 - Filtrer par date de l'opération
2. Chirurgie 2017 avec ajout de trauma v2 - Filtrer par date de l'opération	22. Chirurgie 2017 avec ajout de trauma - Filtrer par date de l'opération
3. Visite de contrôle 2017 - Filtrer par date de suivi	23. Chirurgie 2011 - Filtrer par date de l'opération
4. Conservatif 2018 - Filtrer par date de traitement	24. Chirurgie 2006 - Filtrer par date de l'opération
5. COMI lombaire chir.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	25. Chirurgie 2005 - Filtrer par date de l'opération
6. COMI cervical chir.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	26. Staged 2011 - Filtrer par date de l'opération
7. COMI lombaire cons.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	27. Staged 2006 - Filtrer par date de l'opération
8. COMI cervical cons.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation	28. Staged 2005 - Filtrer par date de l'opération
9. ODI - Filtrer par date d'examen	29. Visite de contrôle 2006 - Filtrer par date de suivi
10. NDI - Filtrer par date d'examen	30. Visite de contrôle 2011 - Filtrer par date de suivi
11. EQ5D 3L - Filtrer par date d'examen	31. Visite de contrôle 2005 - Filtrer par date de suivi
12. EQ5D 5L - Filter by Examination date	32. Conservatif 2011 - Filtrer par date de traitement
13. Intra Neuromonitoring (IONM) - Filter by Monitoring date	33. COMI low back - 1 year postop - Filtrer par date d'évaluation
14. mJOA - Filtrer par date d'évaluation	34. COMI low back - postop - Filtrer par date d'évaluation
15. DRAM - Filtrer par date d'évaluation	35. COMI low back - preop - Filtrer par date d'évaluation
16. NURICK - Filtrer par date d'évaluation	36. COMI neck - 1 year postop - Filtrer par date d'évaluation
17. SRS-30 - Filtrer par date d'examen	37. COMI neck - postop - Filtrer par date d'évaluation
18. SF-36 v2 - Filtrer par date d'examen	38. COMI neck - preop - Filtrer par date d'évaluation
19. AOSpine PROST - Filtrer par date d'évaluation	39. SF-36 v1 - Filtrer par date d'examen
20. Déformation complémentaire adulte - Filtrer par date d'examen	40. Begleiterkrankungen Patient - Filter by Untersuchungsdatum

c. Possibilité de filtrage pour l'exportation

Pour limiter l'exportation des formulaires, vous pouvez sélectionner la période pertinente.



Exportation simple par formulaire

Sélectionnez la période en utilisant la date clé

jj/mm/aaaa et jj/mm/aaaa

Le type de date clé utilisé dans le filtre peut varier d'un formulaire à l'autre. Les dates clés par formulaire sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

	Nom du formulaire	Date clé
1.	Chirurgie SIRIS	Date de l'opération
2.	Chirurgie SIRIS + Tango	Date de l'opération
3.	Chirurgie 2017 V2	Date de l'opération
4.	Chirurgie 2017 avec ajout de trauma v2	Date de l'opération

5.	Visite de contrôle 2017	Date de suivi
6.	Conservateurs 2018	Début de la thérapie
7.	COMI lombaire chir.+ST supp	Date de l'évaluation
8.	COMI cervical chir.+ST supp	Date de l'évaluation
9.	COMI lombaire cons.+ST supp	Date de l'évaluation
10.	COMI cervical cons.+ST supp.	Date de l'évaluation
11.	ODI	Date de l'examen
12.	NDI	Date de l'examen
13.	EQ5D 3L	Date de l'examen
14.	EQ5D 5L	Date de l'examen
15.	Intraop Neuromonitoring (IONM)	Date de contrôle
16.	mJOA	Date de l'évaluation
17.	DRAM	Date de l'évaluation
18.	NURICK	Date de l'évaluation
19.	SRS-30	Date de l'examen
20.	SF-36 v2	Date de l'examen
21.	AOSpine PROST	Date de l'évaluation
22.	Déformation complémentaire adulte	Date de l'examen
23.	Chirurgie 2017	Date de l'opération
24.	Chirurgie 2017 avec ajout de trauma	Date de l'opération
25.	Chirurgie 2011	Date de l'opération
26.	Chirurgie 2006	Date de l'opération
27.	Chirurgie 2005	Date de l'opération
28.	Staged 2011	Date de l'opération
29.	Staged 2006	Date de l'opération
30.	Staged 2005	Date de l'opération
31.	Visite de contrôle 2006	Date de suivi
32.	Visite de contrôle 2011	Date de suivi
33.	Visite de contrôle 2005	Date de suivi
34.	Conservatif 2011	Début de la thérapie
35.	COMI low back - 1 year postop	Date de l'évaluation
36.	COMI low back - postop	Date de l'évaluation
37.	COMI low back - preop	Date de l'évaluation
38.	COMI neck - 1 year postop	Date de l'évaluation

39.	COMI neck - postop	Date de l'évaluation
40.	COMI neck - preop	Date de l'évaluation
41.	SF-36 v1	Date de l'examen
42.	Begleiterkrankungen Patient	Date de l'enquête

Une fois qu'une plage de dates (période) a été sélectionnée, cliquez sur le "bouton d'exécution" (encerclé ci-dessous) pour le formulaire requis afin d'exécuter la recherche.

Résumé	Recherches
	1. Chirurgie SIRIS et Spine Tango - Filtrer par date de l'opération
	2. Visite de contrôle 2017 - Filtrer par date de suivi
	3. Conservatif 2018 - Filtrer par date de traitement
	4. COMI cervical cons.+ST supp. - Filtrer par date d'évaluation

La requête de recherche vous indique ensuite le nombre de formulaires trouvés.

Exportation simple par formulaire	
Sélectionnez la période en utilisant la date clé	
01/01/2023 et 12/06/2024	
Résumé	Recherches
2	1. Chirurgie SIRIS et Spine Tango - Filtrer par date de l'opération

Pour relancer votre recherche sur un autre formulaire en utilisant la même plage de dates, cliquez sur le bouton d'exécution situé à côté du formulaire requis et les résultats s'afficheront.

Exportation simple par formulaire	
Entrer la date clé entre les filtres	
01/01/2021 et 12/06/2024	
Résumé	Recherches
11	1. Chirurgie 2017 V2 - Filtrer par date de l'opération
0	2. Chirurgie 2017 avec ajout de trauma v2 - Filtrer par date de l'opération
1	3. Visite de contrôle 2017 - Filtrer par date de suivi


Si aucun formulaire n'est trouvé, le chiffre « zéro » est affiché.

Exportation simple par formulaire	
Sélectionnez la période en utilisant la date clé	
01/01/2023 et 12/06/2024	
Résumé	Recherches
2	1. Chirurgie SIRIS et Spine Tango - Filtrer par date de l'opération
0	2. Visite de contrôle 2017 - Filtrer par date de suivi
0	3. Conservatif 2018 - Filtrer par date de traitement

Si la fourchette de dates est modifiée, les résultats seront effacés et les recherches devront être relancées avec les nouvelles dates. Les résultats affichés sont toujours basés sur les dates clés spécifiées lors de la recherche.

d. Exportation des résultats

Pour exporter les formulaires trouvés, cliquez sur le bouton Exporter à côté du nombre de formulaires trouvés.

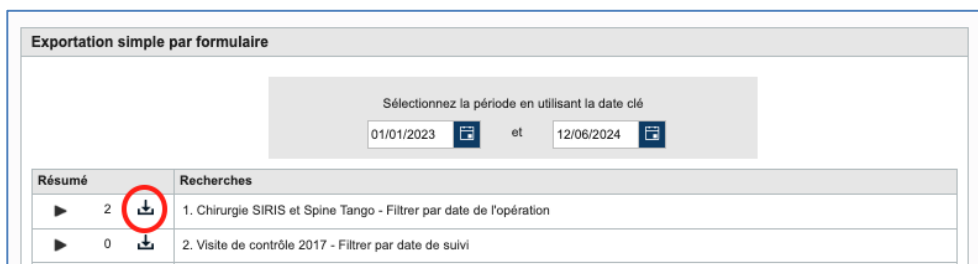

Un fichier zippé sera créé avec les résultats de votre recherche et téléchargé sur votre appareil.



L'exportation est fournie au format csv, avec les données cliniques et toutes les données relatives aux composants exportées dans deux tableaux distincts.

Le fichier csv peut ensuite être édité en tant que données textuelles dans Excel ou d'autres

programmes similaires.

2. Exportations avancées

e. Introduction

La fonction d'exportation avancée permet aux utilisateurs de filtrer les données qu'ils souhaitent exporter.

Les résultats des recherches sont basés sur le lieu où l'utilisateur s'est connecté.

Si un utilisateur se connecte au niveau de la clinique, les résultats affichés seront ceux disponibles au niveau de la clinique et des départements de la clinique. Si l'utilisateur est connecté au niveau du département, il ne verra que les résultats du département auquel il est connecté.

Pour effectuer une exportation avancée, sélectionnez Exportation dans le menu.

Recherche ▾	Ajouter des patient ▾	Exportation de données	Rapports ▾	Statut des ePROMs ▾	Documents pour les utilisateurs ▾
Administration ▾		Exportation simple par formulaire			
Exportation					
Recherche ▲					
Numéro du patient (M.R.N.)	<input type="text"/>	Né entre	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>	et	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>
Nom	<input type="text"/>	Prénom	<input type="text"/>		
Sexe	- Sélectionnez - ▾	ID confidentiel	<input type="text"/>		
Adresse Email	<input type="text"/>				
Statut du formulaire	- Sélectionnez - ▾	Activer les ePROMs ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Patients sans formulaires	<input type="checkbox"/>				
Recherche avancée et exportation ▼					
		Recherche	Réinitialiser	Ajouter des patient	

Cliquez ensuite sur la flèche pointant vers le bas (à droite de Recherche avancée et exportation) pour développer le masque de recherche.

Recherche locale du patient ▲						
Numéro du patient (M.R.N.)	<input type="text"/>	Né entre	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>	et	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>	
Nom	<input type="text"/>	Prénom	<input type="text"/>			
Sexe	- Sélectionnez - ▾	ID confidentiel	<input type="text"/>			
Adresse Email	<input type="text"/>					
Statut du formulaire	- Sélectionnez - ▾	Activer les ePROMs ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
Patients sans formulaires	<input type="checkbox"/>					
Recherche avancée et exportation ▲						
Questionnaire		Divers				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> Questionnaire Sélectionner un questionnaire: <input type="text" value="- Sélectionnez -"/> ▾ </td> </tr> </table>						Questionnaire Sélectionner un questionnaire: <input type="text" value="- Sélectionnez -"/> ▾
Questionnaire Sélectionner un questionnaire: <input type="text" value="- Sélectionnez -"/> ▾						
		Recherche	Réinitialiser	Ajouter des patient		

f. Sélectionner le formulaire à exporter

Comme pour les exportations simples, vous devez sélectionner le formulaire que vous souhaitez exporter.

Recherche locale du patient

Numéro du patient (M.R.N.) Né entre et

Nom Prénom

Sexe - Sélectionnez - ID confidentiel

Adresse Email Médecin - Sélectionnez -

Statut du formulaire - Sélectionnez - Activer les ePROMs ? Oui Non

Patients sans formulaires

Recherche avancée et exportation

Questionnaire Divers Implants

Questionnaire

Sélectionner un questionnaire:
Chirurgie SIRIS

Admission / Pathologie
Intervention
Gestes chirurgicaux

ADMISSION

Pathologie principale
- Sélectionner -

SPÉCIFICATION DE LA PATHOLOGIE PRINCIPALE

Maladie dégénérative

Type de dégénérescence primaire
- Sélectionner -

Spécifiez autre type de dégénérescence

Type de dégénérescence secondaire
- Sélectionner -

Recherche Réinitialiser Ajouter des patient

g. Critères de recherche

La fonction de recherche avancée et d'export permet aux utilisateurs d'affiner leur recherche avec des

- données sur l'admission et la pathologie,
- des Informations sur l'opération, et
- des indications sur les gestes chirurgicaux

Les données relatives à l'admission/la pathologie, à l'opération et aux interventions chirurgicales peuvent être saisies dans le menu de gauche.

Recherche avancée et exportation

Questionnaire Divers Implants

Questionnaire

Sélectionner un questionnaire:
Chirurgie SIRIS

Admission / Pathologie
Intervention
Gestes chirurgicaux

ADMISSION

Pathologie principale
- Sélectionner -

SPÉCIFICATION DE LA PATHOLOGIE PRINCIPALE

Maladie dégénérative

Type de dégénérescence primaire
- Sélectionner -

Spécifiez autre type de dégénérescence

Type de dégénérescence secondaire
- Sélectionner -

Pour effectuer une recherche par date de création/enregistrement du formulaire et par utilisateur, il faut sélectionner le deuxième onglet supérieur "Divers".

Recherche locale du patient

Numéro du patient (M.R.N.) <input style="width: 90%;" type="text"/>	Né entre <input style="width: 20%;" type="text"/> et <input style="width: 20%;" type="text"/>
Nom <input style="width: 90%;" type="text"/>	Prénom <input style="width: 90%;" type="text"/>
Sexe - Sélectionnez -	ID confidentiel <input style="width: 90%;" type="text"/>
Adresse Email <input style="width: 90%;" type="text"/>	Médecin - Sélectionnez -
Statut du formulaire - Sélectionnez -	Activer les ePROMs ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Patients sans formulaires <input type="checkbox"/>	

Recherche avancée et exportation

Questionnaire **Divers** Implants

Divers

Formulaire créé entre <input style="width: 20%;" type="text"/> et <input style="width: 20%;" type="text"/>	Créé par - Sélectionnez -
Formulaire enregistré entre <input style="width: 20%;" type="text"/> et <input style="width: 20%;" type="text"/>	Sauvegardé par - Sélectionnez -

Recherche
Réinitialiser
Ajouter des patient

La fonction de recherche avancée et d'exportation permet également d'effectuer des recherches par implant. Pour limiter la recherche aux données relatives aux implants, l'onglet "Implant" doit être sélectionné.

Recherche avancée et exportation

Questionnaire Divers **Implants**

Recherche dans le catalogue d'implants

Implants avec un minimum de détails

Fabricant Sélectionnez s'il vous plaît

Marque - Sélectionnez -

Description

Numéro de catalogue

Code-barres (GTIN) Numéro de lot

Recherche
Réinitialiser

Résultats de la recherche


Fabricant	Marque	Numéro de catalogue ↑	Description	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ 0 ▶ 5 éléments par page Pas d'éléments </div>				
Sélectionner				

Implant(s) sélectionné(s)

Recherche
Réinitialiser
Ajouter des patient

Une fois que tous les critères de recherche souhaités ont été sélectionnés, il faut cliquer sur le bouton de recherche en bas de la page.

Le résultat de la recherche s'affiche. Vous pouvez consulter les patients trouvés (onglet Démographie) ou les formulaires trouvés (onglet Formulaires). Par défaut, les patients trouvés sont affichés (onglet Démographie).

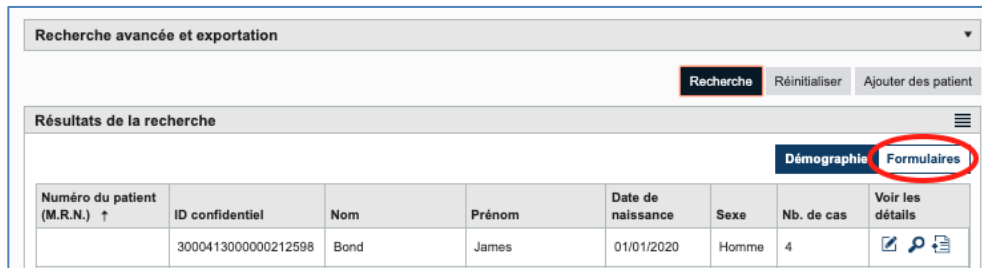




Recherche avancée et exportation

Recherche Réinitialiser Ajouter des patient

Résultats de la recherche


Démographie **Formulaires**

Numéro du patient (M.R.N.) ↑	ID confidentiel	Nom	Prénom	Date de naissance	Sexe	Nb. de cas	Voir les détails
	3000413000000212598	Bond	James	01/01/2020	Homme	4	  

Lorsqu'il n'y a pas de résultats, rien n'est affiché.

h. Exportation des résultats

Les résultats de la recherche peuvent être exportés en sélectionnant export dans le menu hamburger. Pour exporter par formulaires, il faut cliquer sur le bouton "Formulaires" **avant de** lancer l'exportation (sinon l'exportation ne portera que sur les informations démographiques).

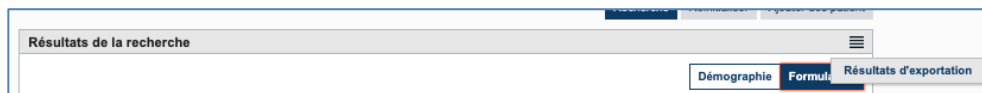


Résultats de la recherche

Démographie **Formu** Résultats d'exportation

La fenêtre suivante s'ouvre. Les utilisateurs peuvent choisir de :

1. exporter tous les champs, ou
2. ne cocher que certains champs et exporter.

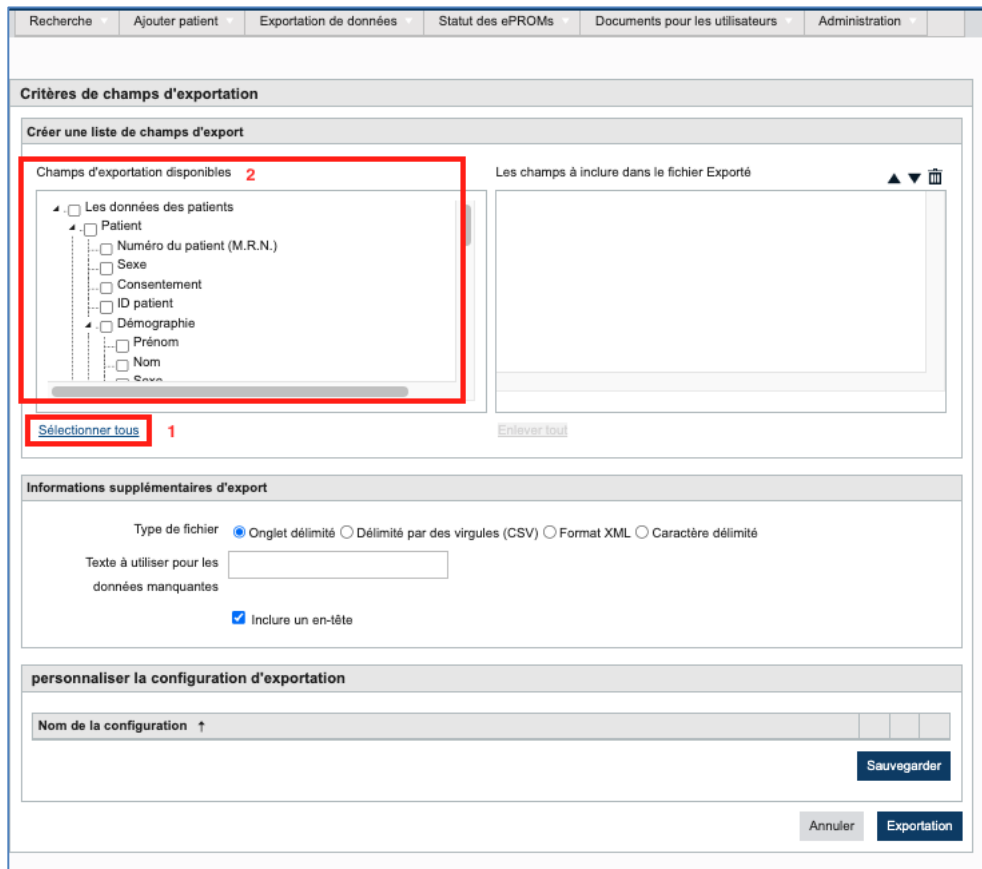

Pour exporter les données, cliquez sur le bouton « Exporter » en bas de la page. Comme pour l'exportation simple par formulaire, l'exportation avancée crée un fichier zippé avec les résultats de votre recherche et le télécharge sur votre ordinateur.

L'exportation se fait au format csv, qui peut ensuite être traité en tant que données textuelles dans Excel ou dans d'autres programmes similaires.

i. Ouverture des données exportées dans Excel

Selon les paramètres de votre ordinateur, votre Excel peut ouvrir directement les données exportées (fichier csv) sous forme de tableau. Si ce n'est pas le cas, allez dans Excel sur Ouvrir les données / à partir du texte / sélectionnez le fichier csv, choisissez le format utf-8 et ouvrez les données.